

BM wiper-S

Super Quality


25K Gyガンマ線滅菌済み！照射証明書付でお届けいたします。

三重包装されており、無菌エリアへの菌・塵埃の持ち込みを
最小限に抑えることができます。


最少包装単位は20枚で作業直前まで滅菌状態を維持できます。

また、作業シフトごとに廃棄する場合でも、無駄が少なく経済的です。


● 紙ワイパー

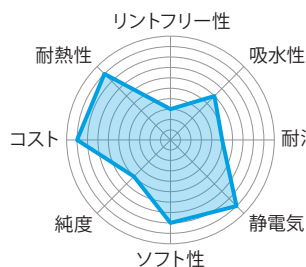


● 合繊長繊維不織布ワイパー

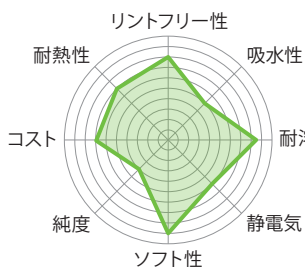

● バインダー不織布ワイパー

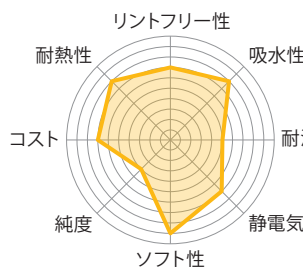

● BM wiper-s

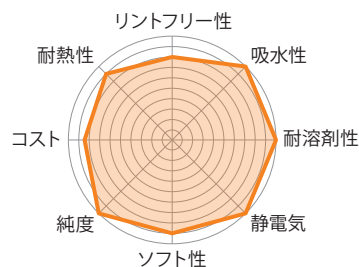


※旭化成せい株式会社 HPより

■ 試験データ

※測定実施施設：当社・クオリティコントロール部門 ※測定環境機器：クリーンルーム・セルプロセッシングアイソレータ (CPWS)

● 無菌試験

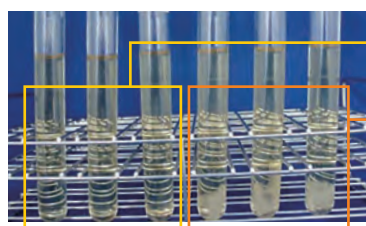


NEGコントロール(-)

BM wiper-s (-)

BM wiper-sを1cm四方にカットし
無菌試験用培地に接種。
14日間培養した結果、
菌の存在を示す白濁を認めなかった。

● エンドトキシン

エンドトキシン濃度 (一般試験)

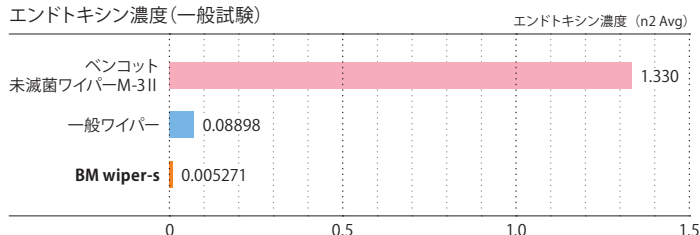

■ 素材情報

※素材提供元：旭化成せい株式会社 ペンリーゼ営業部 2011.07.29

① 素材	Cupra
② 繊維形態	連続長繊維 (エンドレス)
③ 商品形態	4折り
④ 脱落繊維数	1. 旭化成定量法 (>100μm、個/m ²) 2. ウエット振とう法 (定性評価)
⑤ Wetマイクロリント (>0.5μm、×10 ⁴ 個/m ²)	300
⑥ Dryマイクロリント (>0.3μm、個/CF)	3,000
⑦ 繊維油剤等不純物 ミラーウェハ法	◎
⑧ 抽出物量 (ppm)	水 IPA アセトン
⑨ 水抽出イオン (mg/kg)	Na K Ca Cl
⑩ 含有硫黄分 (mg/kg)	<20

■ BM wiper-s

・型式：BM-PS-W0101 ・サイズ：25×25cm 4折 ・入数：1,000枚/箱 ・包装形態：20枚×5袋×10袋×1 ・価格：¥27,500 (※税別・送料別)



B|O|M|E|D|I|C|A S|O|L|U|T|I|O|N
バイオメディカ・ソリューション株式会社

www.bio-ms.com

大阪本社：〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-15 彩都バイオインキュベータ 312
TEL. 072-641-8140 FAX. 072-641-8142